



Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-1020-W

Instruction Manual *Original*

Manuel d'instructions *Traduction*

Manual de Instrucciones *Traducción*

Manuale di Istruzioni *Traduzione*

Instructiehandleiding *Vertaling*

Bruksanvisning *Översättning*

Ohjekirja *Käännös*

Instrukcja obsługi *Tłumaczenie*

使用手冊 *翻譯*

Talimat Kılavuzu *Çeviri*

ترجمہ دليل الإستعمال

ترجمہ دفترچہ را ہنما

English

Français

Español

Italiano

Nederlands

Svenska

Suomi

Polski

中文

TÜRKÇE

عربي

فارسی

فهرست مندرجات

2	مشتریان گرامی.....
2	تذکرات اولیه.....
2	اقدامات احتیاطی.....
4	معرفی قطعات.....
5	نمادها.....
7	حالت عملیات.....
8	استفاده از دستگاه پایش.....
8	نصب / تعویض باتری ها.....
9	متصل کردن شیلنگ هوا.....
9	متصل کردن آداپتور AC.....
10	تنظیم ساعت داخلی.....
11	انتخاب سایز مناسب بازوبند.....
11	استفاده از بازوبند.....
13	نحوه انجام اندازه گیری دقیق.....
13	اندازه گیری.....
13	پس از اندازه گیری.....
14	اندازه گیری ها.....
14	اندازه گیری عادی.....
15	اندازه گیری با فشار تنظیم شده.....
15	اندازه گیری با فشار سیستمی مطلوب.....
15	نکاتی برای اندازه گیری دقیق.....
16	اندازه گیری TriCheck™.....
18	فراخوانی اطلاعات حافظه.....
19	شاخص IHB/AFib چیست؟.....
19	AFib چیست؟.....
19	نوار نشانگر فشار.....
19	شاخص طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO).....
20	در مورد فشار خون.....
20	فشار خون چیست؟.....
20	فشار خون بالا چیست و چگونه کنترل می شود؟.....
20	چرا فشار خون را در خانه اندازه گیری کنم؟.....
20	طبقه بندی فشار خون WHO.....
20	نوسانات فشار خون.....
21	عیب یابی.....
22	نگهداری.....
22	داده های فنی.....

مشتریان گرامی

بابت خرید جدیدترین دستگاه پایش فشار خون A&D که یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های پایش موجود در بازار است، به شما تبریک می‌گوییم. این دستگاه که برای استفاده آسان و در عین حال دقیق طراحی شده است، بررسی روزانه فشار خونتان را تسهیل می‌کند. توصیه می‌شود پیش از آنکه برای اولین بار از این دستگاه استفاده کنید، این دفترچه راهنما را به‌دقت مطالعه کنید.

تذکرات اولیه

- ☐ این دستگاه با دستورالعمل EEC 93/42 برای محصولات پزشکی در اروپا مطابقت دارد. نشان انطباق 0123 CE شهادتی بر این مدعی است.
- (0123: شماره ارجاع به بخش اعلام شده مربوطه)
- ☐ این دستگاه برای استفاده بزرگسالان طراحی شده است، نه نوزادان یا اطفال.
- ☐ محیط کاربرد. این دستگاه به‌گونه‌ای طراحی شده است که شما بتوانید در محیط منزلتان شخصاً از آن استفاده کنید.
- ☐ این دستگاه برای اندازه‌گیری فشار خون و ضربان قلب افراد برای تشخیص بیماری طراحی شده است.

اقدامات احتیاطی

- ☐ در ساخت این دستگاه از اجزای دقیق استفاده شده است. دما و رطوبت شدید، نور مستقیم خورشید، ضربه یا گرد و خاک می‌تواند به آن آسیب برساند.
- ☐ بازوبند و دستگاه را با یک پارچه نرم و خشک یا پارچه نمدار شده با آب یا شوینده خنثی تمیز کنید. هرگز از الکل، بنزن، تینر یا دیگر مواد شیمیایی خورنده برای تمیز کردن بازوبند یا دستگاه استفاده نکنید.
- ☐ از خم کردن زیاد بازوبند یا پیچاندن شیلنگ برای مدت طولانی اجتناب کنید، زیرا این کار موجب کوتاه شدن عمر اجزای دستگاه می‌شود.
- ☐ مراقب باشید که شیلنگ و کابل دستگاه به دور گردن کودکان یا نوزادان نیچد، زیرا می‌تواند موجب خفگی آنها شود.
- ☐ مراقب باشید که در حین استفاده از دستگاه، شیلنگ هوا دچار پیچ‌خوردگی نشود. این امر می‌تواند بر اثر فشار پیوسته بازوبند باعث ایجاد آسیب شود.
- ☐ دستگاه و بازوبند در برابر آب مقاوم نیستند. مراقب باشید که آب، باران و عرق روی دستگاه و بازوبند لکه ایجاد نکنند.
- ☐ اگر از دستگاه در نزدیکی تلویزیون، فر مایکروویو، تلفن همراه، اشعه ایکس یا در نزدیکی دیگر ابزارهایی استفاده کنید که میدان الکتریکی قوی دارند، ممکن است در اندازه‌گیری اختلال ایجاد شود.
- ☐ دستگاه‌های ارتباطی بی‌سیم مانند دستگاه‌های شبکه خانگی و تلفن‌های همراه، تلفن‌های بی‌سیم و پایه آنها، و بیسیم‌ها می‌توانند بر این دستگاه پایش فشار خون تأثیر بگذارند.
- لذا لازم است که حداقل 30 سانتی متر از این دستگاه‌ها فاصله داشته باشید.
- ☐ تجهیزات، قطعات و باتری‌هایی که استفاده شده‌اند، نباید به‌عنوان ضایعات عادی خانگی قلمداد شوند، و باید بر اساس مقررات محلی دور انداخته شوند.
- ☐ وقتی از آداپتور AC استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که آداپتور AC می‌تواند در صورت لزوم به سهولت از پریز برق خارج شود.


- هنگامی که می‌خواهید مجدداً از دستگاه استفاده کنید، از تمیز بودن دستگاه مطمئن شوید.
- تغییر در دستگاه ایجاد نکنید. این کار می‌تواند باعث ایجاد حادثه یا آسیب به دستگاه شود.
- به‌منظور اندازه‌گیری فشار خون، بازو باید توسط بازو بند به‌قدری فشرده شود که موقتاً جریان خون از میان سرخرگ را متوقف کند. این کار می‌تواند باعث ایجاد درد، کمرختی یا قرمزی موقت بازو شود. چنین شرایطی به‌ویژه زمانی ایجاد می‌شود که اندازه‌گیری را چند مرتبه پشت سرهم انجام می‌دهید. هرگونه درد، کمرختی یا قرمزی با گذشت زمان از بین می‌رود.
- اگر اندازه‌گیری فشار خون چندین مرتبه تکرار شود، می‌تواند به دلیل تداخلی که در جریان خون ایجاد می‌کند، به فرد آسیب بزند. این موضوع را بررسی کنید که در صورت تکرار اندازه‌گیری فشار خون، عملیات دستگاه موجب اختلال طولانی مدت در جریان خون نشود.
- اگر عمل ماستکتومی داشته‌اید و سینه‌تان تخلیه شده است، پیش از استفاده از دستگاه، با پزشکتان مشورت کنید.
- اجازه ندهید که کودکان از دستگاه استفاده کنند و در جایی که در دسترس اطفال است از این دستگاه استفاده نکنید. عدم توجه به این موضوع می‌تواند باعث حادثه یا آسیب شود.
- اجزای کوچکی در این دستگاه وجود دارد که در صورت بلعیده شدن توسط اطفال می‌تواند باعث خفگی آنها شود.
- هنگامی که دیگر نمی‌خواهید از دستگاه استفاده کنید، آداپتور AC را خارج کنید.
- استفاده از لوازم جانبی که در این راهنما به آنها اشاره نشده است می‌تواند باعث آسیب به فرد و دستگاه شود.
- در صورتی که باتری اتصال کوتاه شود، ممکن است داغ شده و باعث ایجاد سوختگی شود.
- پیش از استفاده (حدود یک ساعت)، اجازه دهید که دستگاه خودش را با محیط اطراف سازگار کند.
- آزمایش بالینی روی نوزادان و زنان باردار انجام نشده است. لذا از این دستگاه برای نوزادان و زنان باردار استفاده نکنید.
- باتری‌ها، فیش DC و خود بیمار را همزمان لمس نکنید. این کار می‌تواند باعث ایجاد برق‌گرفتگی شود.
- از باد کردن دستگاه بدون پیچاندن آن به دور بازو اجتناب کنید.

موارد منع استفاده


در این بخش موارد احتیاطی برای استفاده صحیح از دستگاه ذکر شده است.

- بازو بند را روی بازویی که تجهیزات الکتریکی پزشکی دیگری روی آن متصل است، به کار نبرید. در چنین شرایطی ممکن است دستگاه به‌خوبی کار نکند.
- افرادی که دچار نقص شدید گردش خون در بازوهایشان هستند باید پیش از استفاده از این دستگاه با پزشکشان مشورت کنند تا از ایجاد مشکلات پزشکی اجتناب شود.
- از تشخیص خودسرانه بر اساس نتایج اندازه‌گیری بپرهیزید و از هرگونه خوددرمانی اجتناب کنید. همیشه برای ارزیابی نتیجه و تجویز درمان مناسب با پزشکتان مشورت کنید.
- بازو بند دستگاه فشار خون را روی بازویی که زخم درمان نشده دارد قرار ندهید.
- بازو بند را روی بازویی که تحت تزریق وریدی یا انتقال خون است، قرار ندهید. این کار می‌تواند باعث حادثه یا آسیب شود.
- در جایی که گازهای اشتعال‌پذیر مانند گازهای بیهوشی وجود دارد نباید از این دستگاه استفاده شود. این کار می‌تواند باعث انفجار شود.
- در محیط‌هایی مانند اتاقک اکسیژن فشار بالا یا چادر اکسیژن که اکسیژن بسیار متراکم دارند، نباید از این دستگاه استفاده شود. این کار می‌تواند باعث آتش‌سوزی یا انفجار شود.

معرفی قطعات


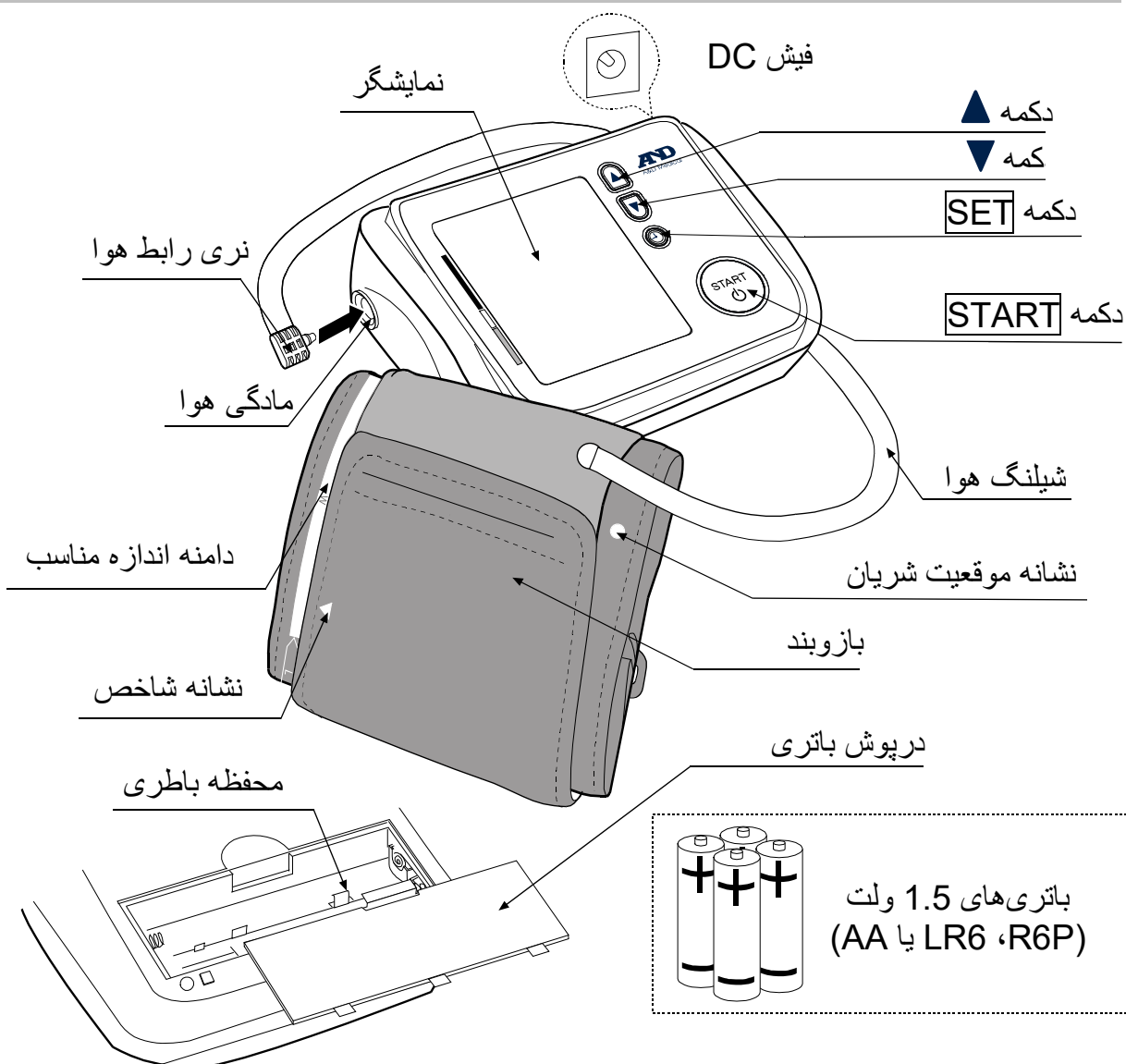


نمایشگر

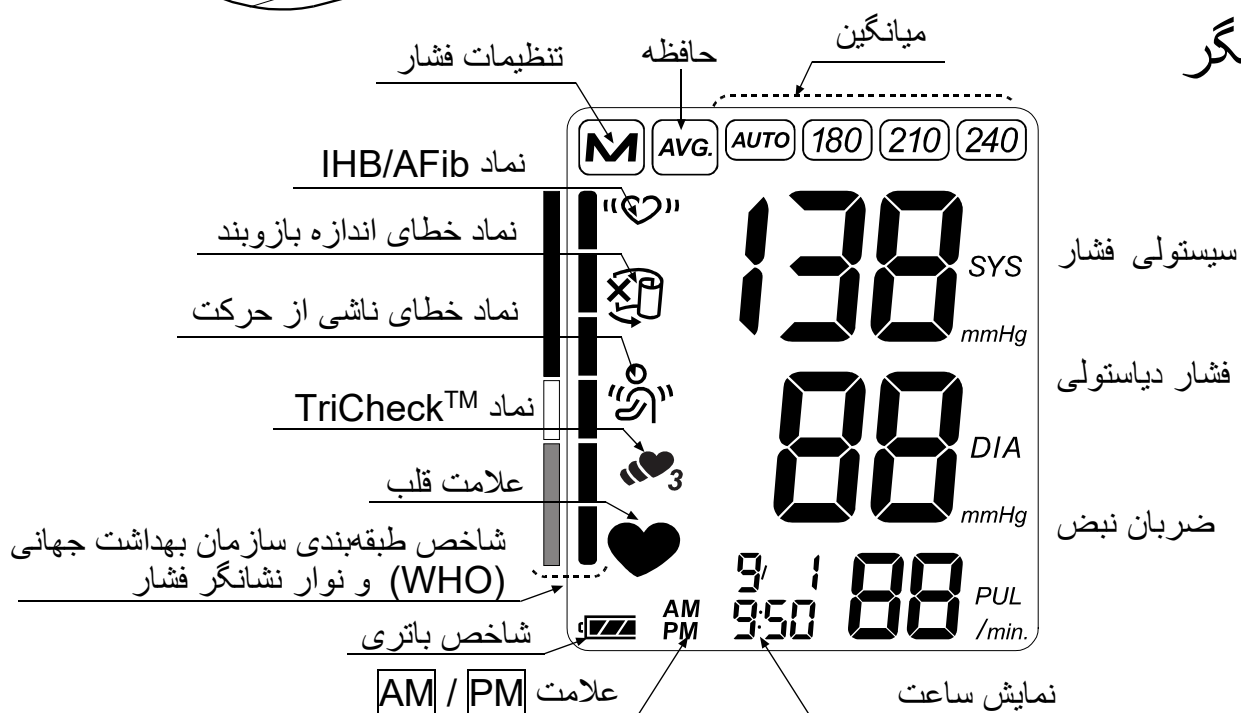

نمادها

نمادهایی که روی جعبه دستگاه و آداپتور AC چاپ شده است

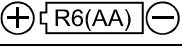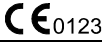نمادها	کارکرد / معنی	عملیات توصیه شده
	حالت آماده به کار و روشن کردن دستگاه.	_____
	راهنمای نصب باتری	_____
	جریان مستقیم	_____
SN	شماره سریال	_____
	تاریخ تولید	_____
	نوع BF: دستگاه، بازوبند و لوله ها به گونه ای طراحی شده اند که از بروز برق گرفتگی جلوگیری شود.	_____
	برچسب دستور العمل EC دستگاه پزشکی	_____
	برچسب WEEE	_____
	تولیدکننده	_____
	نماینده EU	_____
	قطبیت فیش DC	_____
IP	نماد حفاظت بین المللی	_____
	در جای خشک نگهداری کنید	_____

نمادهایی که روی نمایشگر ظاهر می شوند

نمادها	کارکرد / معنی	عملیات توصیه شده
	زمانی ظاهر می شود که اندازه گیری در حال انجام است. هنگامی که نبض شناسایی شد، چشمک می زند.	اندازه گیری در حال انجام است. تا جایی که می توانید بی حرکت بمانید.
	نماد IHB/AFib زمانی ظاهر می شود که ضربان قلب نامنظم شناسایی شود. این نماد زمانی که تکان های بسیار آرامی مانند لرزش شناسایی شود نیز ممکن است روشن شود.	_____
	حالت TriCheck™ این حالت به طور خودکار و پیاپی، سه بار عملیات اندازه گیری را انجام داده و میانگین آنها را نمایش می دهد.	_____
	زمانی ظاهراً می شود که حرکتی در بدن یا بازو شناسایی شود.	ممکن است دستگاه عدد نادرستی را نشان دهد. بار دیگر اندازه گیری را انجام دهید. در طول اندازه گیری بی حرکت بمانید.

نمادها	کارکرد / معنی	عملیات توصیه شده
	زمانی آشکار می شود که در حین اندازه گیری بازوبند شل باشد.	ممکن است دستگاه عدد نادرستی را نشان دهد. بازوبند را به درستی ببندید، و بار دیگر اندازه گیری را انجام دهید.
	اندازه گیری های قبلی که در حافظه ذخیره شده است.	_____
	میانگین اطلاعات	_____
	FULL BATTERY (باتری پر است) نشانگر توان باتری در طول اندازه گیری.	_____
	LOW BATTERY (باتری کم) هنگامی که باتری ضعیف شود، چشمک می زند.	هنگامی که این نشانه چشمک می زند، همه باتری ها را تعویض کنید.
	فشار خون به دلیل تکان خوردن در طول اندازه گیری ناپایدار است.	اندازه گیری را تکرار کنید. در طول اندازه گیری بی حرکت بمانید.
	مقادیر سیستولی و دیاستولی کمتر از 10 mmHg با یکدیگر اختلاف دارند.	بازوبند را به درستی ببندید، و اندازه گیری را تکرار کنید.
	مقدار فشار در زمان باد شدن افزایش نیافت.	
	بازوبند به درستی قرار نگرفته است.	
	PUL DISPLAY ERROR نبض به درستی شناسایی نشده است.	
	خطای داخلی دستگاه پایش فشار خون	باتری ها را خارج کرده و دکمه START را بزنید، و بار دیگر باتری ها را نصب کنید. اگر خطا همچنان ظاهر شد، با فروشنده تماس بگیرید.
	فشار خون سیستولی بر حسب mmHg	_____
	فشار خون دیاستولی بر حسب mmHg	_____
	نبض در دقیقه	_____
	اطلاعاتی که بین ساعت 4:00 تا 9:59 گرفته شده است	_____
	اطلاعاتی که بین ساعت 18:00 تا 1:59 گرفته شده است	_____
	تنظیمات فشار مقدار فشاری را نشان می دهد که قبلاً توسط کاربر تنظیم شده است.	_____


حالت عملیات

1. اندازه‌گیری عادی

دکمه **START** را فشار دهید. فشار خون اندازه‌گیری شده و اطلاعات درون حافظه دستگاه ذخیره می‌شود. این دستگاه می‌تواند به طور خودکار، نود اندازه‌گیری آخر را در حافظه‌اش ذخیره کند.

2. فراخوانی اطلاعات

جهت فراخوانی اطلاعات حافظه، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید. همانگونه که در شکل سمت راست نشان داده شده، میانگین تمام اندازه‌گیری‌ها نمایش داده می‌شود.

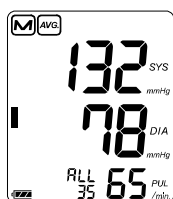



در این حالت، با هر بار فشردن دکمه ▼ اطلاعات حافظه به شکل زیر نمایش داده می‌شود.

میانگین تمام اندازه‌گیری‌های AM (صبح) که بین ساعات 4:00 تا 9:59 انجام شده است.

میانگین تمام اندازه‌گیری‌های PM (شب) که بین ساعات 18:00 تا 1:59 انجام شده است.

جدیدترین اطلاعات (No.n در مثال نشان داده شده No.35)


قدیمی‌ترین اطلاعات (No.1)

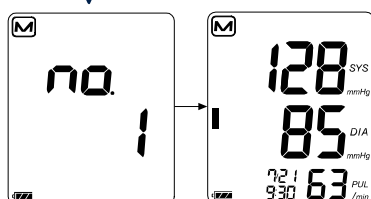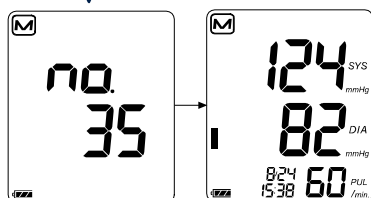

برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد فراخوانی اطلاعات، به بخش فراخوانی "اطلاعات حافظه مراجعه کنید". (به صفحه 18 مراجعه کنید)

3. حذف کلیه اطلاعات ذخیره‌شده در حافظه

دکمه‌های ▲ و ▼ را به طور همزمان فشار دهید. علامت M و نشانگر باتری ظاهر می‌شوند. جهت حذف تمام اطلاعات ذخیره‌شده در حافظه، دکمه‌های ▲ و ▼ را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که علامت M نمایش داده شده شروع به چشمک زدن کند.

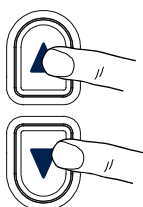


4. اندازه‌گیری با فشار سیستولی مطلوب

به صفحه 15 مراجعه کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد اندازه‌گیری با فشار سیستولی مطلوب بیابید.

استفاده از دستگاه پایش

نصب / تعویض باتری ها

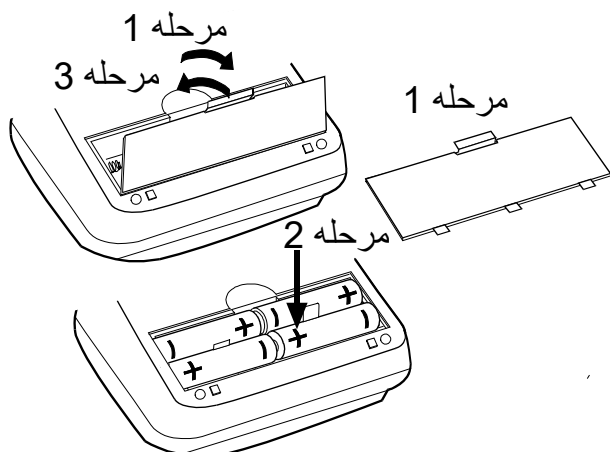

1. درپوش باطری را بردارید.

2. باتری های کهنه را بردارید و همان طور که نشان داده شده است، باتری های نو را در محفظه باطری قرار دهید. مراقب باشید که قطب های باتری (+ و -) در جای صحیح قرار گیرند. صرفاً از باتری های LR6، R6P یا AA استفاده کنید.

3. درپوش باتری را بگذارید.


احتیاط

- باتری ها را طبق تصویر در محفظه باطری قرار دهید. اگر باتری ها به شکل نادرست قرار گیرند، دستگاه کار نخواهد کرد.
- وقتی [باتری علامت LOW BATTERY] شروع به چشمک زدن کرد، همه باتری ها را با باتری های نو تعویض کنید. باتری های کهنه و نو را با هم در دستگاه قرار ندهید. این کار می تواند موجب کوتاه شدن عمر باتری یا نقص در عملکرد دستگاه شود.
- باتری ها را دو یا چند ثانیه بعد از خاموش کردن دستگاه تعویض کنید.
- اگر [باتری علامت LOW BATTERY] حتی پس از تعویض باتری ها ظاهر شد، یکبار اندازه گیری فشار خون را انجام دهید. آنگاه دستگاه می تواند باتری های جدید را شناسایی کند.
- هنگامی که باتری ها خالی شده باشند، [باتری علامت LOW BATTERY] ظاهر نمی شود.
- عمر باتری بسته به دمای پیرامونی می تواند متغیر باشد و در دمای کم ممکن است عمر باتری کمتر شود. معمولاً، چهار باتری نو LR6 در دستگاهی که دو بار در روز استفاده می شود، حدوداً یک سال عمر می کند.
- صرفاً از باتری های تعیین شده استفاده کنید. باتری هایی که همراه با دستگاه به شما داده می شوند، برای آزمایش عملکرد دستگاه هستند و لذا ممکن است عمر محدودی داشته باشند.
- اگر قرار است که از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نکنید، باتری هایش را خارج کنید. ممکن است باتری نشت کند و باعث اختلال در کارکرد دستگاه شود.

استفاده از دستگاه پایش


متصل کردن شیلنگ هوا

نری رابط هوا را به داخل مادگی هوا وارد کرده و از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

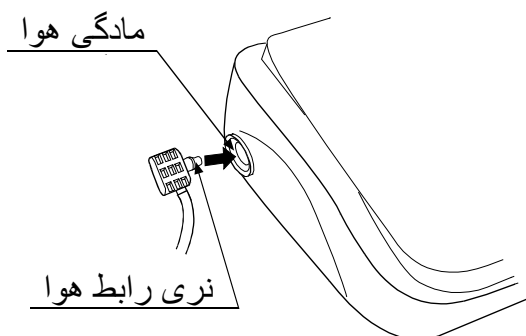

متصل کردن آداپتور AC

نری آداپتور AC را به فیش DC وارد کنید. سپس، آداپتور AC را به پریز برق متصل کنید.

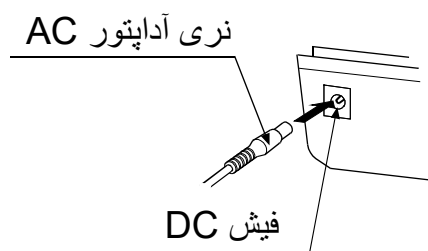

□ از آداپتور AC مشخص شده استفاده کنید. (به صفحه 23 مراجعه کنید.)


□ هنگامی که می‌خواهید آداپتور AC را از پریز برق جدا کنید، بدنه آداپتور AC را بگیرید و بکشید.

□ هنگامی که می‌خواهید فیش آداپتور AC را از دستگاه پایش فشار خون جدا کنید، فیش آداپتور AC را گرفته و از دستگاه بیرون بکشید.

استفاده از دستگاه پایش

تنظیم ساعت داخلی

قبل از استفاده، ساعت را تنظیم کنید.

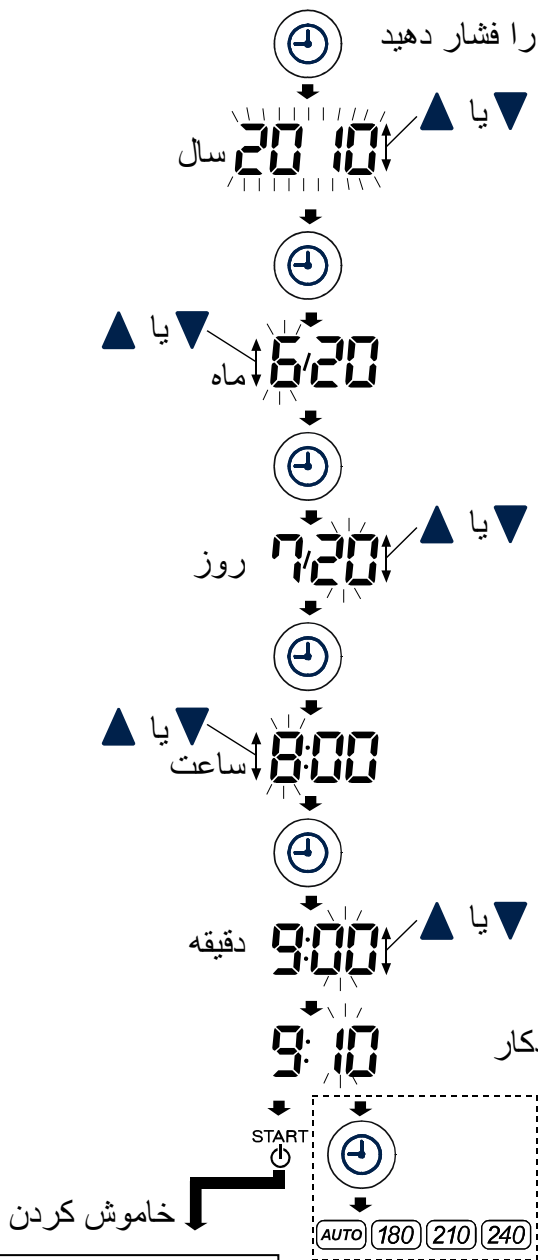

1. دکمه [SET] را فشار دهید تا زمانی که عدد مربوط به سال شروع به چشمک زدن کند.

2. با استفاده از دکمه‌های ▲ یا ▼ سال مورد نظر را انتخاب کنید. جهت تنظیم سال و انتخاب ماه/روز، دکمه [SET] را فشار دهید. محدوده سال‌های قابل انتخاب جهت تنظیم تاریخ، از 2010 تا 2059 می‌باشد.

3. با استفاده از دکمه‌های ▲ یا ▼ ماه مورد نظر را انتخاب کنید. جهت تنظیم ماه و انتخاب روز، دکمه [SET] را فشار دهید.

4. با استفاده از کلیدهای ▲ یا ▼ روز مورد نظر را انتخاب کنید. جهت تنظیم روز و انتخاب ساعت/دقیقه، دکمه [SET] را فشار دهید.

5. با استفاده از دکمه‌های ▲ یا ▼ ساعت مورد نظر را انتخاب کنید. جهت تنظیم ساعت و انتخاب دقیقه، دکمه [SET] را فشار دهید.

6. با استفاده از دکمه‌های ▲ یا ▼ دقیقه مورد نظر را انتخاب کنید. (جهت رفتن به حالت تنظیم فشار، دکمه [SET] را فشار دهید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 15 مراجعه کنید.) برای خاموش کردن دستگاه، دکمه [START] را فشار دهید.

توجه: پس از سه دقیقه عدم استفاده از دستگاه، خودش به‌طور خودکار خاموش خواهد شد.

هنگامی که ساعت تنظیم نشده است،
همانگونه که در سمت راست نشان داده شده، نشانگر ساعت به جای اعداد، خط - - / - -
- - : - - تیره نمایش می‌دهد.

□ با نگه داشتن کلیدهای ▲ یا ▼ می‌توانید مقادیر را به‌طور پیوسته تغییر دهید.

حالت تنظیم فشار

فشاردن دکمه [START] در هر لحظه موجب خاموش شدن دستگاه خواهد شد.

استفاده از دستگاه پایش

انتخاب سایز مناسب بازوبند

استفاده از بازوبندی با اندازه مناسب نقش مهمی در قرائت صحیح دستگاه دارد. اگر اندازه بازوبند مناسب نباشد، ممکن است قرائت دستگاه دچار اشتباه شود.


- اندازه بازو روی هر بازوبند چاپ شده است.
- شاخص ▲ و دامنه اندازه مناسب روی بازوبند به شما می‌گوید که آیا از بازوبند صحیحی استفاده می‌کنید یا خیر. (به بخش "نمادهای چاپ‌شده روی بازوبند" در صفحه بعد مراجعه کنید)
- اگر شاخص ▲ خارج از دامنه مورد نظر است، جهت خرید بازوبند دیگر با فروشنده محلی‌تان تماس بگیرید.
- بازوبند به‌عنوان یک کالای مصرفی قلمداد می‌شود. اگر بازوبند پاره شد، یکی دیگر بخرید.

اندازه بازو	اندازه توصیه شده بازوبند	شماره کاتالوگ
31 سانتی‌متر تا 45 سانتی‌متر	بازوبند سایز بزرگ بزرگسالان	CUF-F-LA
22 سانتی‌متر تا 42 سانتی‌متر	بازوبند عریض	CUF-I
22 سانتی‌متر تا 32 سانتی‌متر	بازوبند بزرگسالان	CUF-F-A
16 سانتی‌متر تا 24 سانتی‌متر	بازوبند سایز کوچک بزرگسالان	CUF-F-SA

اندازه بازو: محیط بازو در بخش عضله دو سر.

استفاده از بازوبند


1. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بازوبند را دور بازو، یعنی 1 الی 2 سانتی‌متر بالاتر از گودی آرنج ببندید. بازوبند را مستقیماً روی پوست قرار دهید، زیرا لباس می‌تواند باعث تضعیف ضربان شود و در قرائت خطا ایجاد کند.
2. تنگ شدن بازو بر اثر بالا زدن زیاد آستین می‌تواند باعث ایجاد خطا در قرائت دستگاه شود.
3. مطمئن شوید که شاخص ▲ در دامنه اندازه مناسبی قرار دارد.

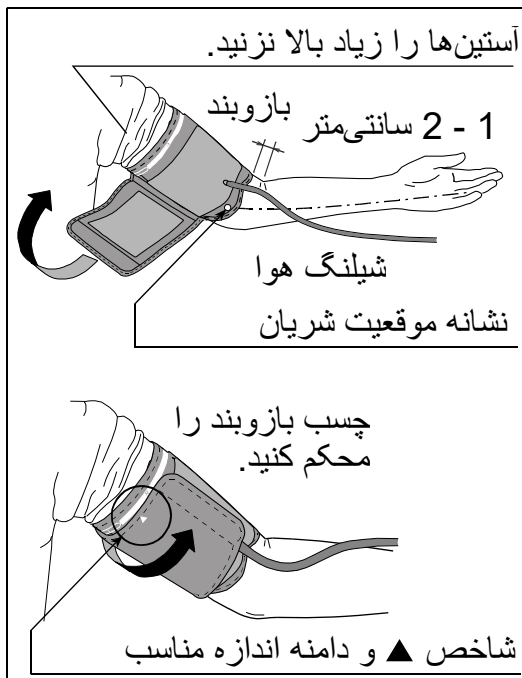

استفاده از دستگاه پایش

نمادهای چاپ شده روی بازوبند

نمادها	کارکرد / معنی	عملیات توصیه شده
●	نشانه موقعیت شریان	نشانه ● را روی شریان بازو یا همراستا با انگشت حلقه در داخل بازو تنظیم کنید.
▲	شاخص	_____
REF	شماره کاتالوگ	_____
A	دامنه اندازه مناسب برای بازوبند بزرگسالان. این علامت روی بازوبند بزرگسالان چاپ شده است.	_____
L	خارج از دامنه‌ای که روی بازوبند بزرگسال و بازوبند عریض چاپ می‌شود.	از بازوبند بزرگ بزرگسالان به جای بازوبند بزرگسالان یا بازوبند عریض استفاده کنید.
W	دامنه اندازه مناسب برای بازوبند عریض. روی بازوبند عریض چاپ شده است.	_____
L	دامنه اندازه مناسب برای بازوبند سایز بزرگ بزرگسالان. این علامت روی بازوبند سایز بزرگ بزرگسال چاپ شده است.	_____
S	خارج از دامنه‌ای که روی بازوبند بزرگسال و بازوبند عریض چاپ می‌شود.	از بازوبند سایز کوچک بزرگسالان به جای بازوبند بزرگسالان یا بازوبند عریض استفاده کنید.
S	دامنه اندازه مناسب برای بازوبند سایز کوچک بزرگسالان. این علامت روی بازوبند سایز کوچک بزرگسالان چاپ شده است.	_____
A	این علامت روی بازوبند سایز بزرگ بزرگسالان چاپ شده است.	از بازوبند سایز بزرگ بزرگسالان یا بازوبند سایز کوچک بزرگسالان استفاده کنید.
LOT	شماره دسته	_____

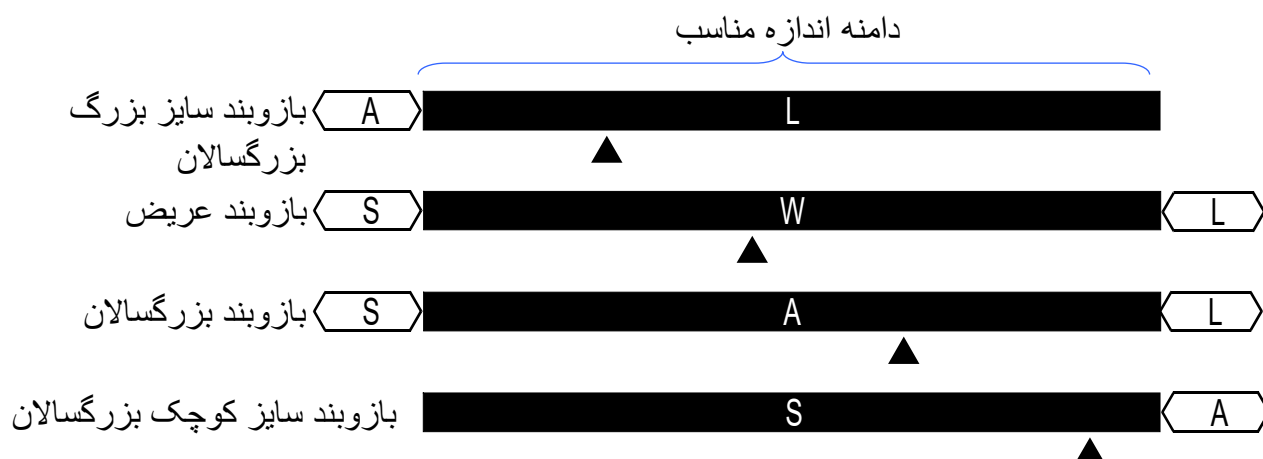

استفاده از دستگاه پایش

نحوه انجام اندازه‌گیری دقیق

بهمنظور انجام دقیق‌ترین اندازه‌گیری فشار خون:

- آرام روی صندلی بنشینید. دست‌هایتان را روی میز بگذارید. پاهایتان را روی هم نیندازید. پاهایتان را صاف روی زمین بگذارید و کمرتان را صاف کنید.
- به مدت پنج الی ده دقیقه آرام باشید و سپس اندازه‌گیری را انجام دهید.
- مرکز بازوبند را هم‌تراز با قلبتان قرار دهید.
- در طول اندازه‌گیری بی‌حرکت و آرام بمانید.
- اندازه‌گیری نباید بلافاصله پس از ورزش یا حمام کردن انجام شود. بیست الی سی دقیقه آرام بمانید و بعد اندازه‌گیری را انجام دهید.
- سعی کنید اندازه‌گیری فشار خون را هر روز در یک ساعت معین انجام دهید.

اندازه‌گیری

در طول اندازه‌گیری، طبیعی است که احساس کنید بازوبند خیلی محکم بسته شده است. (نگران نباشید).

پس از اندازه‌گیری


پس از اندازه‌گیری، دکمه **START** را بزنید تا دستگاه خاموش شود. بازوبند را باز کنید و اطلاعات را ثبت کنید. پس از یک دقیقه عدم استفاده از دستگاه، خودش به‌طور خودکار خاموش خواهد شد.

اندازه‌گیری‌ها


پیش از اندازه‌گیری، بخش "نکاتی برای اندازه‌گیری دقیق" در صفحه 16 را مطالعه کنید.

اندازه‌گیری عادی

1. بازوبند را دور بازو (ترجیحاً روی بازوی چپ) قرار دهید.
در حین اندازه‌گیری آرام بمانید.
 2. دکمه **START** را فشار دهید.
همه بخش‌های نمایشگر نمایان می‌شوند.
صفر (0) نمایان می‌شود که اندکی چشمک می‌زند.
هنگامی که اندازه‌گیری آغاز می‌شود، همان‌طور که در تصویر سمت راست نشان داده شده است، نمایشگر تغییر می‌کند. بازوبند شروع به باد شدن می‌کند. احساس تنگی بازوبند طبیعی است. نوار نشانگر فشار در لبه سمت چپ نمایشگر در طول باد کردن نمایان می‌شود.
نکته: هر زمان خواستید باد کردن را متوقف کنید، دکمه **START** را مجدداً فشار دهید.
 3. وقتی باد کردن تمام شد، خارج شدن باد به‌صورت خودکار آغاز شده و ♥ (علامت قلب) شروع به چشمک زدن می‌کند، که نشان می‌دهد اندازه‌گیری در حال انجام است. هنگامی که ضربان قلب تشخیص داده شد، علامت قلب با هر ضربان چشمک می‌زند.
نکته: اگر فشار مناسب به دست نیامد، دستگاه به‌طور خودکار مجدداً شروع به باد شدن می‌کند.
برای اجتناب از باد شدن مجدد، به بخش "اندازه‌گیری با فشار تنظیم شده" در صفحه بعد مراجعه کنید.
 4. وقتی اندازه‌گیری تمام شد، قرائت فشار سیستولی و دیاستولی و ضربان نبض نمایش داده می‌شوند.
هوای باقی‌مانده از بازوبند خارج شده و باد آن به‌طور کامل خالی می‌شود.
 5. دکمه **START** را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.
پس از یک دقیقه عدم استفاده از دستگاه، خودش به‌طور خودکار خاموش خواهد شد.
- نکته: اندازه‌گیری فشار خون یک فرد را با فاصله حداقل سه دقیقه انجام دهید.

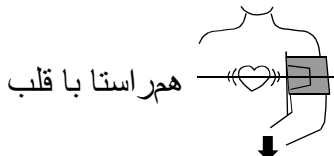

هم‌راستا با قلب

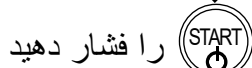


را فشار دهید




کلیه بخش‌های نمایشگر نمایش داده می‌شوند


نمایش صفر شروع باد شدن

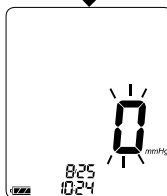

در حال افزایش فشار

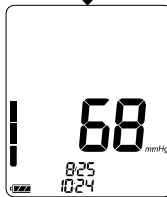

اندازه‌گیری در حال انجام است

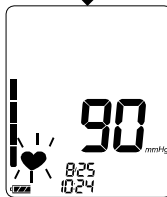

فشار سیستولی

فشار دیاستولی

طبقه‌بندی WHO

ضربان نبض




هوای باقی‌مانده را به‌صورت خودکار بیرون می‌دهد

اندازه‌گیری‌ها

UA-1020-W برای شناسایی ضربان قلب و باد کردن خودکار بازوبند تا رسیدن به سطح فشار سیستولی مشخص طراحی شده است. در صورت باد شدن مجدد و مکرر دستگاه، روش‌های زیر را به کار ببرید.

اندازه‌گیری با فشار تنظیم شده

در طول فرایند اندازه‌گیری فشار خون، ممکن است بازوبند مجدداً باد شود. جهت جلوگیری از باد شدن مجدد، امکان تنظیم یک فشار ثابت وجود دارد.

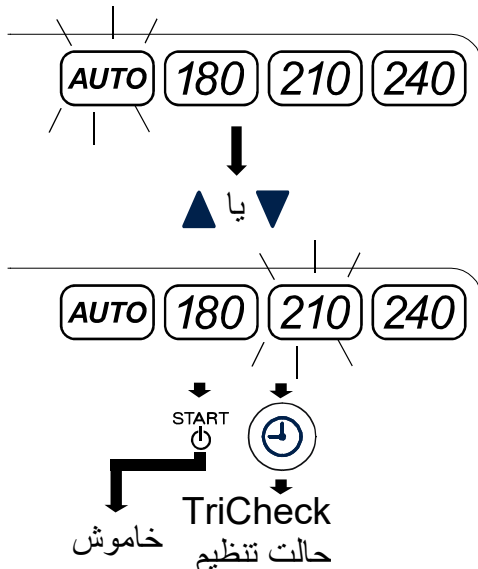

1. در مرحله 6 تنظیم ساعت (صفحه 10 را مشاهده کنید)، جهت رفتن به حالت تنظیم فشار، دکمه **SET** را فشار دهید. حالت تنظیم شده فعلی چشمک می‌زند.

2. با فشردن کلیدهای ▲ یا ▼ و از میان حالت‌های زیر، مقدار فشاری که حدود 30 mmHg یا بیشتر از فشار سیستولی مورد انتظار شما بیشتر است، انتخاب کنید.

AUTO: تنظیم فشار خودکار (مقدار پیش‌فرض)

180: مقدار فشار 180 mmHg (ثابت)


210: مقدار فشار 210 mmHg (ثابت)

240: مقدار فشار 240 mmHg (ثابت)

3. جهت رفتن به حالت تنظیم TriCheck، دکمه **SET** را فشار دهید. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه **START** را فشار دهید. پس از سه دقیقه عدم استفاده از دستگاه، خودش به‌طور خودکار خاموش خواهد شد. اندازه‌گیری بعدی با مقدار فشار جدید انجام خواهد شد.

اندازه‌گیری با فشار سیستولی مطلوب


از این روش هنگامی استفاده کنید که حتی با تنظیم فشار روی **240** باد کردن مجدد چندین بار تکرار می‌شود یا هنگامی که حتی با کاهش فشار به 20 mmHg یا کمتر نتایج نشان داده نمی‌شوند.

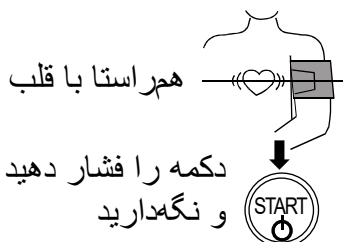

1. بازوبند را دور بازو (ترجیحاً روی بازوی چپ) قرار دهید.

2. زمانی که علامت صفر شروع به چشمک زدن کرد، دکمه **START** را فشار دهید و نگهدارید تا عددی در حدود 30 تا 40 mmHg بالاتر از فشار سیستولی مورد انتظار ظاهر شود.

3. هنگامی که به رقم مورد نظر رسیدید، دکمه **START** را رها کنید تا اندازه‌گیری آغاز شود. به همان ترتیبی که در صفحه قبل توضیح داده شد، به اندازه‌گیری فشار خونتان ادامه دهید.

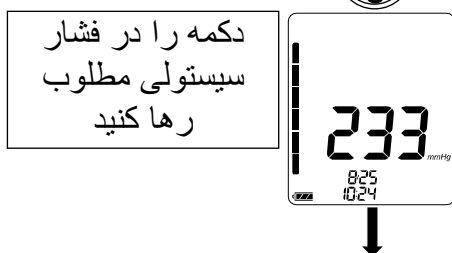

نکاتی برای اندازه‌گیری دقیق

- در موقعیت راحتی بنشینید. دست‌هایتان را روی میز قرار دهید به گونه‌ای که کف دست‌هایتان رو به بالا بوده و بازوبند و قلبتان هم‌تراز باشند.
- پیش از آغاز اندازه‌گیری، حدود پنج تا ده دقیقه آرام باشید. اگر به دلیل تنش‌های هیجانی دچار هیجان یا افسردگی هستید، فشار خونتان بالاتر (یا پایین‌تر) از فشار خون نرمال نشان داده خواهد شد، و ضربان قلب نیز معمولاً سریع‌تر از حالت نرمال می‌باشد.
- فشار خون یک فرد مرتباً در حال تغییر است و به کاری که انجام می‌دهد و غذایی که خورده است بستگی دارد. آنچه نوشیده‌اید می‌تواند تأثیر بسیار قوی و سریعی روی فشار خونتان داشته باشد.
- مبنای اندازه‌گیری‌های این دستگاه ضربان قلب می‌باشد. اگر ضربان قلب بسیار ضعیف یا نامنظمی داشته باشید، ممکن است دستگاه به‌سختی بتواند فشار خونتان را تشخیص دهد.
- اگر دستگاه وجود شرایط غیر طبیعی را تشخیص دهد، اندازه‌گیری را متوقف می‌کند و نماد خطا ظاهر می‌شود. برای مشاهده توضیح نمادها، به صفحه 6 مراجعه کنید.
- این دستگاه پایش فشار خون برای استفاده بزرگسالان طراحی شده است. اگر می‌خواهید از این دستگاه برای کودکان استفاده کنید، با پزشکتان مشورت کنید. کودکان نباید بدون کمک بزرگسالان از این دستگاه استفاده کنند.
- عملکرد دستگاه خودکار پایش فشار خون می‌تواند تحت تأثیر دما یا رطوبت شدید یا ارتفاع قرار گیرد.


اندازه‌گیری TriCheck™

حالت TriCheck™ به طور خودکار و پیاپی، سه بار عملیات اندازه‌گیری را انجام داده و میانگین آنها را نمایش می‌دهد.

در حالت تنظیم فشار،




را فشار دهید

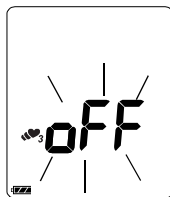

حالت تنظیم شده فعلی چشمک می‌زند



تنظیم را تغییر دهید

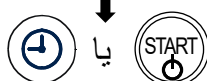


انتخاب حالت TriCheck™

1. در حالت تنظیم فشار، جهت ورود به حالت تنظیم TriCheck™، دکمه **SET** را فشار دهید. حالت تنظیم شده فعلی چشمک می‌زند.
2. با استفاده از دکمه‌های ▲ یا ▼ می‌توانید حالت TriCheck™ را خاموش یا روشن کنید.
روشن: حالت TriCheck™
خاموش: حالت اندازه‌گیری عادی (حالت پیش‌فرض)
3. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه **START** یا **SET** را فشار دهید. پس از سه دقیقه عدم استفاده از دستگاه، خودش به‌طور خودکار خاموش خواهد شد.


اندازه‌گیری با استفاده از حالت TriCheck™

1. دکمه **START** را فشار دهید.

همه بخش‌های نمایشگر نمایان می‌شوند.
صفر (0) نمایان می‌شود و اندکی چشمک می‌زند، سپس اندازه‌گیری اول آغاز می‌شود.

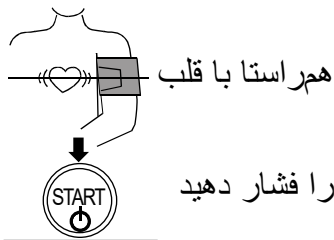


هم‌راستا با قلب
را فشار دهید

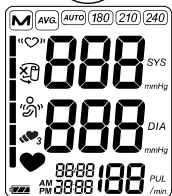

کلیه بخش‌های
نمایشگر


اولین اندازه‌گیری

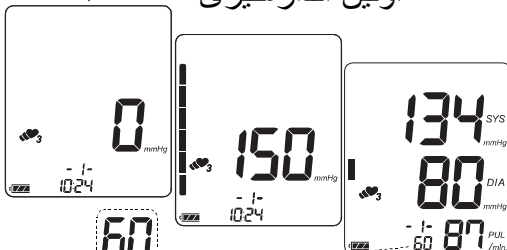

نتایج اولین
اندازه‌گیری

یک دقیقه بعد


دومین اندازه‌گیری

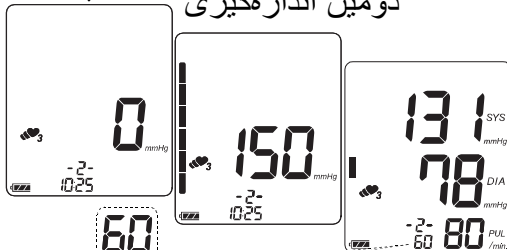

میانگین اندازه‌گیری
اول و دوم

یک دقیقه بعد

سومین اندازه‌گیری

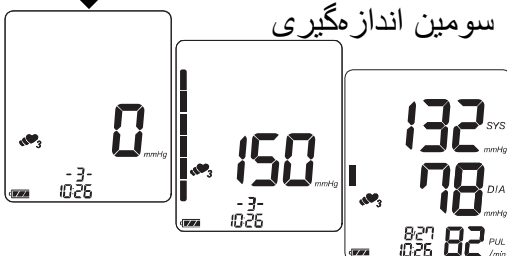

میانگین سه
اندازه‌گیری

2.

وقتی اندازه‌گیری تمام شد، قرائت فشار سیستولی و دیاستولی و ضربان نبض نمایش داده می‌شوند، سپس شمارش معکوس یک دقیقه‌ای برای شروع اندازه‌گیری دوم آغاز می‌شود.

3.

پس از گذشت یک دقیقه، اندازه‌گیری دوم آغاز می‌شود.

4.

وقتی اندازه‌گیری تمام شد، میانگین قرائت‌های فشار اولین و دومین اندازه‌گیری نمایش داده می‌شود، سپس شمارش معکوس یک دقیقه‌ای برای شروع اندازه‌گیری سوم آغاز می‌شود.

5.

پس از گذشت یک دقیقه، اندازه‌گیری سوم آغاز می‌شود.

6.

وقتی اندازه‌گیری تمام شد، میانگین قرائت‌های سه اندازه‌گیری نمایش داده‌شده و در حافظه ذخیره می‌شود.

نکات:

□ در طول فرایند اندازه‌گیری، نماد TriCheck™ نمایش داده می‌شود.

□ برای لغو اندازه‌گیری، دکمه **START** را فشار دهید. در این حالت، هیچ اطلاعاتی در حافظه ذخیره نمی‌شود.


□ در صورتی که نماد خطای اندازه بازوبند در اولین اندازه‌گیری ظاهر شد، اندازه‌گیری را لغو کنید، مجدداً بازوبند را به طور صحیح ببندید و اندازه‌گیری جدیدی را شروع کنید.

□ پس از اتمام اندازه‌گیری، میانگین اطلاعات مربوط به سه اندازه‌گیری در حافظه ذخیره می‌شود.

در صورت لغو اندازه‌گیری‌ها قبل از تکمیل سومین اندازه‌گیری، هیچ اطلاعاتی در حافظه ذخیره نمی‌شود.

فراخوانی اطلاعات حافظه

نکته: این دستگاه می‌تواند به طور خودکار، نود اندازه‌گیری آخر را در حافظه‌اش ذخیره کند.

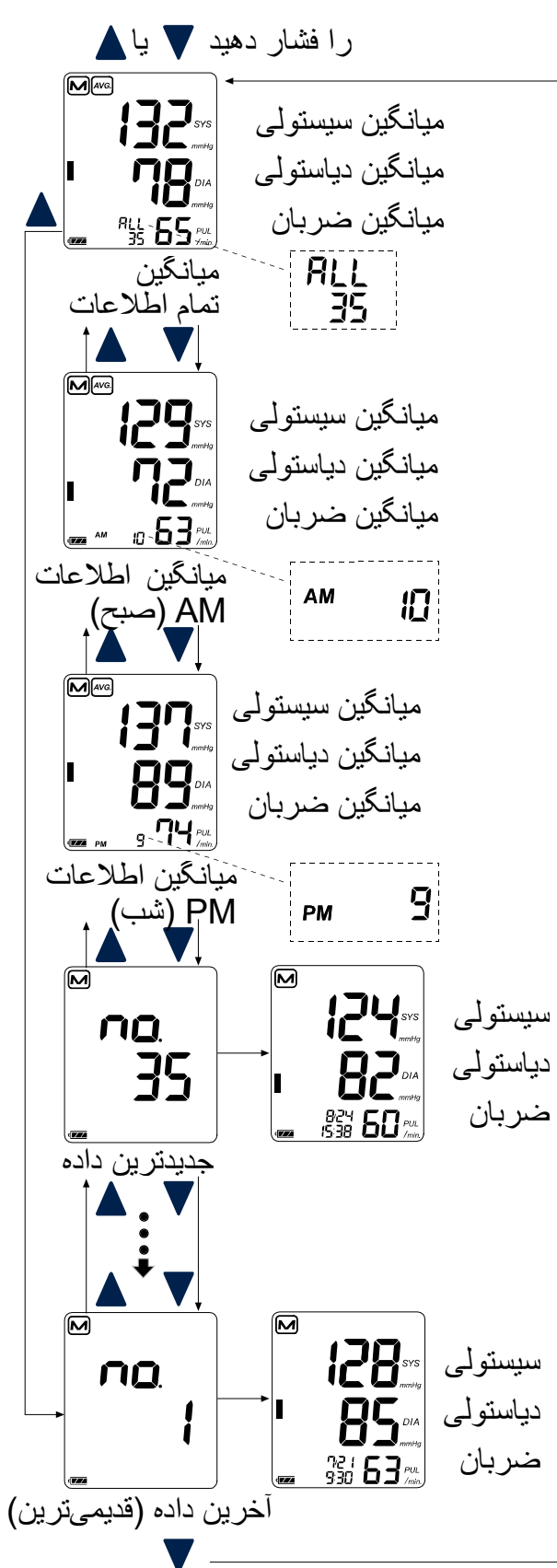

1. دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.
میانگین تمام اندازه‌گیری‌ها و تعداد اطلاعات ذخیره شده، نمایش داده می‌شود.
(در صورتی که هیچ اطلاعاتی موجود نباشد، "0" نمایش داده می‌شود. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه ▲، ▼ یا **START** را فشار دهید.)
2. هر بار که دکمه ▼ (یا دکمه ▲ جهت نمایش اطلاعات به ترتیب معکوس) فشار داده شود، اطلاعات حافظه به شکل زیر نمایش داده می‌شوند.
میانگین تمام اندازه‌گیری‌های AM (صبح) که بین ساعات 4:00 تا 9:59 انجام شده است.
(در مثال نشان داده شده، 10 اندازه‌گیری در صورتی که هیچ اطلاعاتی موجود نباشد، "--" نمایش داده می‌شود.)
↓
میانگین تمام اندازه‌گیری‌های PM (شب) که بین ساعات 18:00 تا 1:59 انجام شده است.
(در مثال نشان داده شده، 9 اندازه‌گیری در صورتی که هیچ اطلاعاتی موجود نباشد، "--" نمایش داده می‌شود.)
↓
جدیدترین اطلاعات (No.n) در مثال نشان داده شده (No.35)
سه ثانیه پس از نمایش شماره اطلاعات، اطلاعات اندازه‌گیری نمایش داده می‌شود.
↓
قدیمی‌ترین اطلاعات (No.1)
سه ثانیه پس از نمایش شماره اطلاعات، اطلاعات اندازه‌گیری نمایش داده می‌شود.
3. پس از اینکه قدیمی‌ترین اطلاعات نمایش داده شد، جهت بازگشت به صفحه نمایش میانگین تمام اندازه‌گیری‌ها، دکمه ▼ را فشار دهید.
4. دکمه **START** را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. پس از یک دقیقه عدم استفاده از دستگاه، خودش به‌طور خودکار خاموش خواهد شد.

شاخص IHB/AFib چیست؟

وقتی دستگاه ریتم نامنظمی را در طول اندازه‌گیری شناسایی کند، نشانگر IHB/AFib روی نمایشگر همراه با مقادیر اندازه‌گیری ظاهر می‌شود.


نکته: توصیه می‌شود که در صورت مشاهده مکرر شاخص IHB/AFib «♥» با پزشکتان تماس بگیرید.

AFib چیست؟

قلب به دلیل سیگنال‌های الکتریکی که در قلب روی می‌دهد، منقبض می‌شود و خون را به کل بدن می‌فرستد. فیبریلاسیون دهلیزی (AFib) زمانی روی می‌دهد که سیگنال الکتریکی در دهلیز قلب مغشوش شده و منجر به آشفتگی در فواصل ضربان می‌شود. AFib می‌تواند موجب شود که خون در قلب از حرکت بازایستد که به‌سادگی می‌تواند باعث ایجاد لخته خون و به تبع آن موجب سکته و حمله قلبی شود.

نوار نشانگر فشار


این نشانگر میزان فشار در طول اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

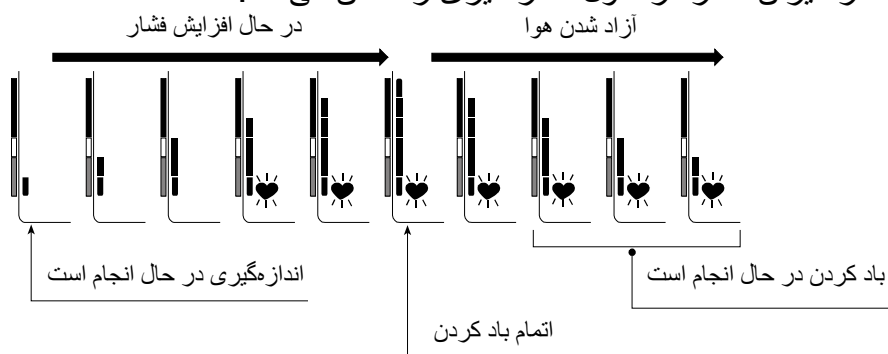

شاخص طبقه‌بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO)

هر بخش از نوار نشانگر متناظر با یک بخش از طبقه‌بندی فشار خون سازمان بهداشت جهانی (WHO) است.

شاخص طبقه‌بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO)

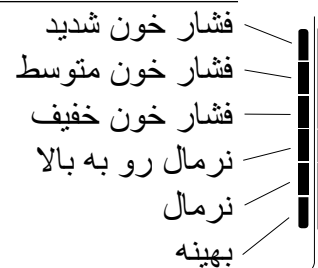

این شاخص یک بخش را نمایش می‌دهد که بر مبنای اطلاعات کنونی و متناسب با طبقه‌بندی WHO می‌باشد.

مثال:



فشار خون متوسط



فشار خون خفیف



نرمال رو به بالا

در مورد فشار خون

فشار خون چیست؟

فشار خون نیرویی است که خون به دیواره رگ‌ها وارد می‌کند. فشار سیستولی زمانی روی می‌دهد که قلب منقبض می‌شود. فشار دیاستولی زمانی روی می‌دهد که قلب منبسط می‌شود. فشار خون بر حسب میلی‌متر جیوه (mmHg) اندازه‌گیری می‌شود. فشار خون طبیعی یک فرد توسط فشار پایه نشان داده می‌شود که اول صبح زمانی که فرد هنوز در حال استراحت است و غذایی نخورده اندازه‌گیری می‌شود.

فشار خون بالا چیست و چگونه کنترل می‌شود؟

فشار خون بالا که به معنای فشار خون غیر نرمال بالای شریانی است، در صورتی که درمان نشود می‌تواند مشکلات زیادی را برای قلب از جمله سکته و حمله قلبی ایجاد کند. فشار خون بالا می‌تواند از طریق تغییر سبک زندگی، پرهیز از استرس و مصرف دارو تحت نظر پزشک کنترل شود. برای پیشگیری از ابتلا به افزایش فشار خون، باید آن را تحت کنترل داشته باشید:

- ☐ سیگار نکشید
- ☐ مرتب ورزش کنید
- ☐ مصرف نمک و چربی را کاهش دهید
- ☐ به‌طور مرتب برای چک آپ و معاینه پزشکی مراجعه کنید
- ☐ وزن مناسب داشته باشید

چرا فشار خون را در خانه اندازه‌گیری کنم؟


اندازه‌گیری فشار خون در کلینیک یا مطب پزشک می‌تواند باعث ایجاد ترس در فرد شده و این امر می‌تواند باعث افزایش مقدار قرائت شده توسط دستگاه به میزان 25 تا 30 mmHg بیش از فشار خون اندازه‌گیری شده در منزل شود. اندازه‌گیری فشار خون در خانه موجب کاهش تأثیر عوامل خارجی بر قرائت فشار خون می‌شود، مکمل قرائت پزشک است و سابقه دقیق‌تر و کامل‌تری از فشار خونتان را در اختیار پزشک قرار می‌دهد.

طبقه‌بندی فشار خون WHO


استانداردهای ارزیابی فشار خون بالا، بدون در نظر گرفتن سن، توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) طبق نمودار، ارائه شده‌اند.

نوسانات فشار خون

فشار خون یک فرد در طول روز و در فصول مختلف به شدت تغییر می‌کند. فشار خون یک فرد می‌تواند بر اثر شرایط مختلف در طول روز به میزان 30 تا 50 mmHg تغییر کند. در

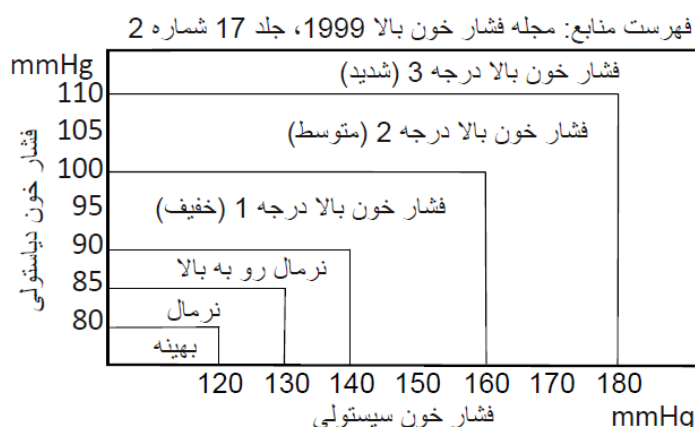

افرادی که دچار فشار خون بالا هستند، این نوسانات حتی بیشتر نیز می‌باشد. معمولاً فشار خون در محل کار یا در زمان بازی افزایش یافته و در طول خواب به کمترین میزان خود می‌رسد. لذا با مشاهده نتایج یکبار اندازه‌گیری بیش از حد نگران نشوید.

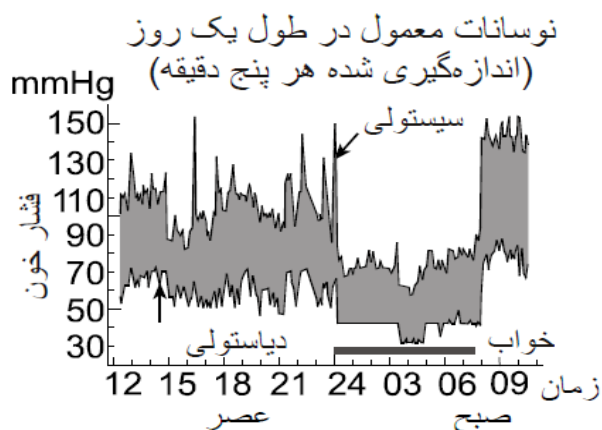

اندازمگیری فشار خون را هر روز در زمان مشخصی انجام داده و از دستورالعملی که در این راهنما توضیح داده شده است استفاده کنید تا فشار خون نرمالتان را پیدا کنید. قرائت منظم می‌تواند سابقه جامعی از فشار خونتان را در اختیارتان قرار دهد. هنگام ثبت فشار خونتان، حتماً تاریخ و ساعت را قید کنید. برای تفسیر اطلاعات فشار خونتان، با پزشک مشورت کنید.

عیب‌یابی

مشکل	دلیل احتمالی	عملیات توصیه‌شده
هیچ چیزی نمایش داده نمی‌شود، حتی زمانی که دستگاه روشن است.	باتری‌ها خالی شده‌اند.	همه باتری‌ها را با باتری‌های نو جایگزین کنید.
	انتهای باتری‌ها در موقعیت صحیح قرار نگرفته‌اند.	باتری‌ها را خارج کنید و آنها را مطابق با علامت مثبت و منفی که در محفظه باطری نوشته شده است، در جای خود قرار دهید.
بازوبند باد نمی‌شود.	ولتاژ باتری خیلی کم است. ❏ (علامت LOW BATTERY) چشمک می‌زند. اگر باتری‌ها به‌طور کامل خالی شده باشند، این علامت ظاهر نمی‌شود.	همه باتری‌ها را با باتری‌های نو جایگزین کنید.
دستگاه اندازمگیری نمی‌کند. مقادیر قرائت‌شده خیلی بالا یا خیلی پایین هستند.	بازوبند به‌درستی روی بازو یا مچ قرار داده نشده است.	بازوبند را به‌درستی دور بازو قرار دهید.
	در حین اندازمگیری بازو یا بدن‌تان را تکان داده‌اید.	مطمئن شوید که بدن شما در حین اندازمگیری بی‌حرکت و آرام باشد.
	بازوبند در موقعیت صحیح قرار ندارد.	راحت و بی‌حرکت بنشینید. دست‌هایتان را روی میز قرار دهید به گونه‌ای که کف دست‌هایتان رو به بالا بوده و بازوبند و قلبتان هم‌تراز باشند.
		اگر ضربان قلب خیلی ضعیف یا نامنظمی داشته باشید، ممکن است دستگاه به سختی بتواند فشار خونتان را تعیین کند.
سایر موارد	عدد نشان داده شده توسط دستگاه متفاوت از عددی است که در کلینیک یا مطب پزشک اندازمگیری شده است.	به بخش "چرا فشار خون را در خانه اندازمگیری کنم؟" مراجعه کنید.
		باتری‌ها را خارج کنید. آنها را به درستی در جای خود قرار دهید و بار دیگر اندازمگیری را انجام دهید.

توجه: اگر کلیه اقدامات ذکرشده را انجام دادید اما مشکلاتان حل نشد، با فروشنده تماس بگیرید. سعی نکنید این محصول را باز یا تعمیر کنید، زیرا این کار موجب بی‌اعتبار شدن گارانتی آن می‌شود.

نگهداری

دستگاه را باز نکنید. این دستگاه از اجزای الکتریکی ظریف و واحد هوای پیچیده‌ای تشکیل شده است که می‌تواند آسیب ببیند. اگر نتوانستید با استفاده از راهنمای عیب‌یابی مشکل دستگاه را حل کنید، با فروشنده مجاز شهرتان یا بخش خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. اطلاعات فنی، قطعات و واحدهای یدکی از طریق بخش خدمات مشتریان A&D در اختیار فروشندگان مجاز قرار می‌گیرند.

این دستگاه برای خدمات‌دهی طولانی مدت طراحی و تولید شده است. اما توصیه می‌شود که هر 2 سال یکبار دستگاه را بررسی کنید تا از کارکرد صحیح و دقت آن مطمئن شوید. لطفاً برای سرویس و نگهداری دستگاه، با فروشنده محلی مجاز یا A&D تماس بگیرید.

داده‌های فنی

نوع	UA-1020-W
روش اندازه‌گیری	اندازمگیری نوسان‌سنجی
محدوده اندازه‌گیری	فشار: 0 تا 299 mmHg فشار سیستولی: 60 تا 279 mmHg فشار دیاستولی: 40 تا 200 mmHg ضربان: 40 تا 180 بار / دقیقه
دقت اندازه‌گیری	فشار: ± 3 mmHg ضربان: $\pm 5\%$
منبع تغذیه	4 عدد باتری 1.5 ولتی (R6P، LR6 یا AA) یا آداپتور AC (TB-233C) (ندارد)
تعداد اندازه‌گیری‌ها	حدود 1000 مرتبه LR6 (باتری‌های آلکالاین) حدود 300 مرتبه R6P (باتری‌های منگیزی) با مقدار فشار 180 mmHg، دمای اتاق 23 درجه سانتی‌گراد
طبقه‌بندی	تجهیزات EM با توان داخلی (تغذیه توسط باتری) / کلاس 2 (تغذیه توسط آداپتور) حالت عملیات پیوسته
آزمایش بالینی	مطابق استاندارد ISO81060-2 : 2013 در بررسی اعتبارسنجی بالینی، از K5 جهت تعیین فشار خون دیاستولی برای 85 سوژه استفاده شد
EMD	IEC 60601-1-2 2014
حافظه	90 اندازه‌گیری آخر
شرایط کار	+10 تا +40 °C / رطوبت نسبی 15 تا 85 درصد / 800 تا 1060 هکتوپاسکال

شرایط حمل و نقل / نگهداری

-20 تا +60 °C / رطوبت نسبی 10 تا 95 درصد / 700 تا 1060 هکتوپاسکال

ابعاد

حدود 140 (عرض) در 60 (طول) در 105 (عمق) میلی‌متر

وزن

حدود 285 گرم، بدون باتری‌ها

قطعه به‌کاررفته

بازوبند نوع BF 

حفاظت ورودی

دستگاه: IP20

عمر مفید

دستگاه: 5 سال (در شرایطی که شش بار در روز استفاده شود)
بازوبند: 2 سال (در شرایطی که شش بار در روز استفاده شود)
آداپتور AC: 5 سال (در شرایطی که شش بار در روز استفاده شود)

آداپتور AC یدکی

TB-233C

آداپتور برای متصل کردن دستگاه به منبع برق خانگی می‌باشد.

لطفاً برای خرید، با فروشنده محلی A&D تماس بگیرید.
آداپتور AC باید به‌صورت دوره‌ای بررسی و تعویض شود.

نمادهایی که روی آداپتور AC چاپ شده است

نمادها	کارکرد / معنی
	صرفاً برای استفاده در محیط‌های سربسته
	دستگاه کلاس دو
	فیوز حرارتی
	فیوز
	برچسب دستورالعمل EC دستگاه
	برچسب مجوز EAC دستگاه
	قطب‌های نری آداپتور AC

لوازم جانبی که جدا فروخته می‌شوند
بازوبند

شماره کاتالوگ	اندازه بازوبند	اندازه بازو
CUF-F-LA	بازوبند سایز بزرگ بزرگسالان	31 سانتی‌متر تا 45 سانتی‌متر
CUF-I	بازوبند عریض	22 سانتی‌متر تا 42 سانتی‌متر
CUF-F-A	بازوبند بزرگسالان	22 سانتی‌متر تا 32 سانتی‌متر
CUF-F-SA	بازوبند سایز کوچک بزرگسالان	16 سانتی‌متر تا 24 سانتی‌متر

آداپتور AC

شماره کاتالوگ	دوشاخه
TB-233C	نوع C

توجه: ممکن است مشخصات بدون اطلاع قبلی تغییر داده شوند.


طبقه‌بندی IP میزان حفاظت فراهم‌شده توسط محفظه تجهیزات مطابق با IEC 60529 می‌باشد.
این دستگاه در برابر اشیاء خارجی جامد با قطر 12 میلی‌متر و بیشتر مانند انگشت مقاوم می‌باشد.
این دستگاه در برابر آب مقاوم نیست.

[illegible]



 A&D Company, Ltd.

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

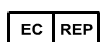

Emergo Europe B.V.

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

ООО A&D RUS

ООО "ЭЙ энд ДИ РУС"

121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17
(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17)
тел.: [7] (495) 937-33-44 факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd 爱安德技研贸易(上海)有限公司

中国 上海市浦东新区浦东大道138号永华大厦21楼A室 邮编200120
(21F Room A, Majesty Building, No.138 Pudong Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 200120, China)
电话: [86] (21) 3393-2340 传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED ऐ&डी इन्स्ट्रूमेंट्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड

509, उद्योग विहार , फेस -5, गुडगांव - 122016, हरियाणा , भारत
(509, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon - 122 016, Haryana, India)
फोन : 91-124-4715555 फैक्स : 91-124-4715599